



Silhouette Soft Comprendre les concepts clés

 SILHOUETTE SOFT®



COMPRENDRE LES CONCEPTS CLÉS

1

CONSIDÉRER LA ZONE À TRAITER

Silhouette Soft repositionne les compartiments graisseux superficiels affaissés responsables des préoccupations les plus courantes des patients: plis nasogéniens, lignes de marionnettes et bajoues

2

SÉLECTIONNEZ SOIGNEUSEMENT VOTRE PATIENT

Lors de la sélection du patient, il est important de:

- Évaluer la gravité de l'affaissement: les patients appropriés doivent présenter un affaissement léger à modéré
- Évaluer la qualité de la peau (ni trop fine, ni trop épaisse)

3

MARQUAGE ET POINT DE TIRAGE LE PLUS EFFICACE

Déterminez où votre dernier cône doit être placé pour repositionner efficacement les compartiments du coussin adipeux plutôt que de tirer sur la peau

À partir du point de tirage, déterminez les points d'entrée et de sortie dans le cas de 8/12 cônes

Suivez le processus d'insertion: 1 - côté distal de la suture / 2 - côté proximal de la suture

4

DÉTERMINER LES VECTEURS LES PLUS EFFICACES

Toujours perpendiculaire à la zone à traiter

Vecteur de ligne droite

5

DÉTERMINER LE NB APPROPRIÉ DE SUTURES ET DE MOTIFS

Utilisez le nombre approprié de sutures pour obtenir l'ampleur / la zone souhaitée de repositionnement tissulaire en fonction du degré d'affaissement

UNDERSTANDING THE KEY CONCEPTS

1

CONSIDÉREZ LA ZONE À TRAITER Silhouette Soft repositionne les compartiments graisseux superficiels affalés responsables des préoccupations les plus courantes des patients : Plis nasolabial, lignes de marionnettes et bajoues

2

SÉLECTIONNEZ VOTRE PATIENT AVEC SOIN

Lors de la sélection du patient, il est important de:

- Évaluer la gravité de l'affaissement: les patients appropriés devraient présenter un affaissement modéré et modéré
- Évaluer la qualité de la peau (ni trop fine, ni trop épaisse)

3

MARQUAGE ET POINT DE TRACTION LE PLUS EFFICACE

Déterminez où votre dernier cône doit être placé pour repositionner efficacement les compartiments de tampon de graisse plutôt que de tirer sur la peau

À partir du point de traction déterminez les points d'entrée et de sortie dans le cas de 8 / 12 cônes

Suivez le processus d'insertion : 1 - côté distal de la suture / 2 - côté proximal de la suture

4

- DÉTERMINER LES VECTEURS LES PLUS EFFICACES
- Toujours perpendiculaire à la zone à traiter
- Vecteur en ligne droite

5

- DÉTERMINER LE NB APPROPRIÉ DES SUTURES ET DES MOTIFS
- Utilisez le nombre approprié de sutures pour atteindre l'ampleur désirée / zone des tissus

1- CONSIDER THE AREA TO TREAT

	Superficial fat layer (Hypodermis)	Fat compartments at different levels
Emplacement	* Couche uniforme, uniformément répartie * Situé entre le derme et le SMAS	* Divisé en compartiments * Bien défini par septae * Différentes profondeurs
Changements liés à l'âge	* Ne change pas avec l'âge * Changements en fonction du poids corporel * Suit le déplacement de structures plus profondes	* Largement affecté par l'âge * Compartiments graisseux superficiels: déplacés (Silhouette Soft indication) * Compartiments à graisse profonde: perdre 1% du volume chaque année à partir de l'âge de 30 ans
Justification du traitement	Cette zone doit être traitée avec d'autres traitements esthétiques (toxine, charges, etc.) pour réduire les rides et améliorer la qualité de la peau	Cette zone doit être traitée avec : Silhouette Douce pour repositionner les compartiments graisseux superficiels Remplisseurs pour ajouter du volume à la graisse profonde compartments

Superficial cheek fat compartments

- a) Infraorbital fat
- b) medial cheek fat
- c) nasolabial fat
- d) middle cheek fat
- e) lateral cheek fat
- f) superior jowl fat
- g) inferior jowl fat

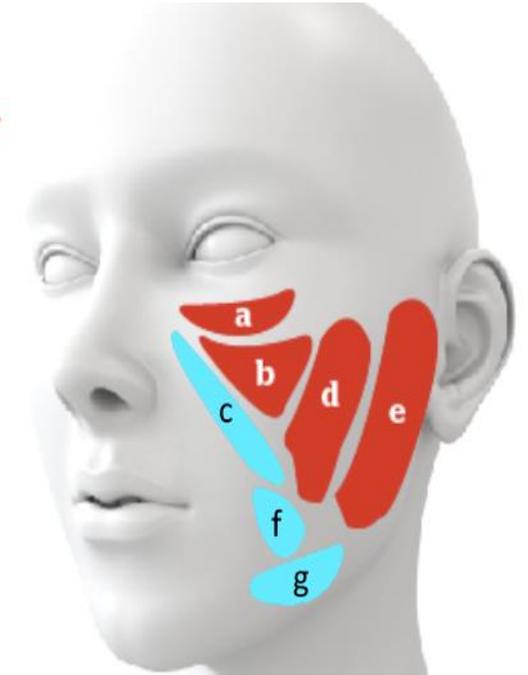


Figure 1: Compartiments superficiels de graisse de joue. Rorich et Pessa et coll.

Silhouette Soft est capable de repositionner les compartiments graisseux superficiels affalés responsables des préoccupations les plus courantes des patients : Plis nasolabial, Ligne de marionnettes et bajoues .

UNDERSTANDING THE KEY CONCEPTS

1

- CONSIDÉREZ LA ZONE À TRAITER
- Silhouette Soft repositionne les compartiments graisseux superficiels affalés responsables des préoccupations les plus courantes des patients : Plis nasolabial, lignes de marionnettes

2

SÉLECTIONNEZ VOTRE PATIENT AVEC SOIN

Lors de la sélection du patient, il est important de:

- Évaluer la gravité de l'affaissement: les patients appropriés devraient présenter un affaissement modéré et modéré
- Évaluer la qualité de la peau (ni trop fine, ni trop épaisse)

3

MARQUAGE ET POINT DE TRACTION LE PLUS EFFICACE

Déterminez où votre dernier cône doit être placé pour repositionner efficacement les compartiments de tampon de graisse plutôt que de tirer sur la peau

À partir du point de traction déterminer les points d'entrée et de sortie dans le cas de 8 / 12 cônes

Suivez le processus d'insertion : 1 - côté distal de la suture / 2 - côté proximal de la suture

4

DÉTERMINER LES VECTEURS LES PLUS EFFICACES

Toujours perpendiculaire

5

DÉTERMINER LE NB APPROPRIÉ DES SUTURES ET DES MOTIFS

Utilisez le nombre approprié de sutures pour atteindre l'ampleur désirée / zone de repositionnement des tissus en fonction du degré d'affaissement

2- SÉLECTIONNEZ VOTRE PATIENT AVEC SOIN

Les critères de sélection des patients sont essentiels à l'obtention de résultats efficaces, naturels et durables.

Lors de la sélection du patient, il est important de :

- évaluer la gravité de l'affaissement : les patients appropriés devraient présenter un affaissement modéré
- évaluer la qualité de la peau (cela ne doit être ni trop mince, ni trop épais)



Courtesy of Dr Russo

COMPRENDRE LES CONCEPTS CLÉS

1

CONSIDÉREZ LA ZONE À TRAITER

Silhouette Soft repositionne les compartiments graisseux superficiels affalés responsables des préoccupations les plus courantes des patients : Plis nasolabial, lignes de marionnettes et bajoues

2

SÉLECTIONNEZ VOTRE PATIENT AVEC SOIN

Lors de la sélection du patient, il est important de:
- Évaluer la gravité de l'affaissement: les patients appropriés devraient présenter un affaissement modéré et modéré

3

MARQUAGE ET POINT DE TRACTION LE PLUS EFFICACE

Déterminez où votre dernier cône doit être placé pour repositionner efficacement les compartiments de tampon de graisse plutôt que de tirer sur la peau

À partir du point de traction déterminer les points d'entrée et de sortie dans le cas de 8 / 12 cônes

Suivez le processus d'insertion :
1 - côté distal de la suture / 2 - côté proximal de la suture

4

DÉTERMINER LES VECTEURS LES PLUS EFFICACES

Toujours perpendiculaire à la zone à traiter
Vecteur en ligne droite

5

- DÉTERMINER LE NB APPROPRIÉ DES SUTURES ET DES MOTIFS
- Utilisez le nombre approprié de sutures pour atteindre l'ampleur désirée / zone de repositionnement des tissus en fonction du degré d'affaissement
-

3 - DÉTERMINER LE POINT DE TRACTION LE PLUS EFFICACE



1. Sélectionnez la zone à traiter 

2. Trouvez le point de traction efficace 

3. Direction de traction : vecteur 

4.

Les vecteurs doivent être aussi perpendiculaires que possible à la zone à traiter.

3 - DÉTERMINER LE POINT DE TRACTION LE PLUS EFFICACE

A = Dernier placement
de cône
B = Point de sortie (inférieur)




Déterminer où le dernier cône doit être placé (A) pour obtenir le meilleur repositionnement des compartiments de tampon de graisse

Marquer le point de sortie, minimum 1-1.5cm loin du dernier cône (B)

DÉTERMINER LES POINTS D'ENTRÉE/SORTIE POUR 8 CÔNES

- A = Dernier placement de cône
- B = Point de sortie (inférieur)
- C = Point d'entrée
- D = Point de sortie (supérieur)

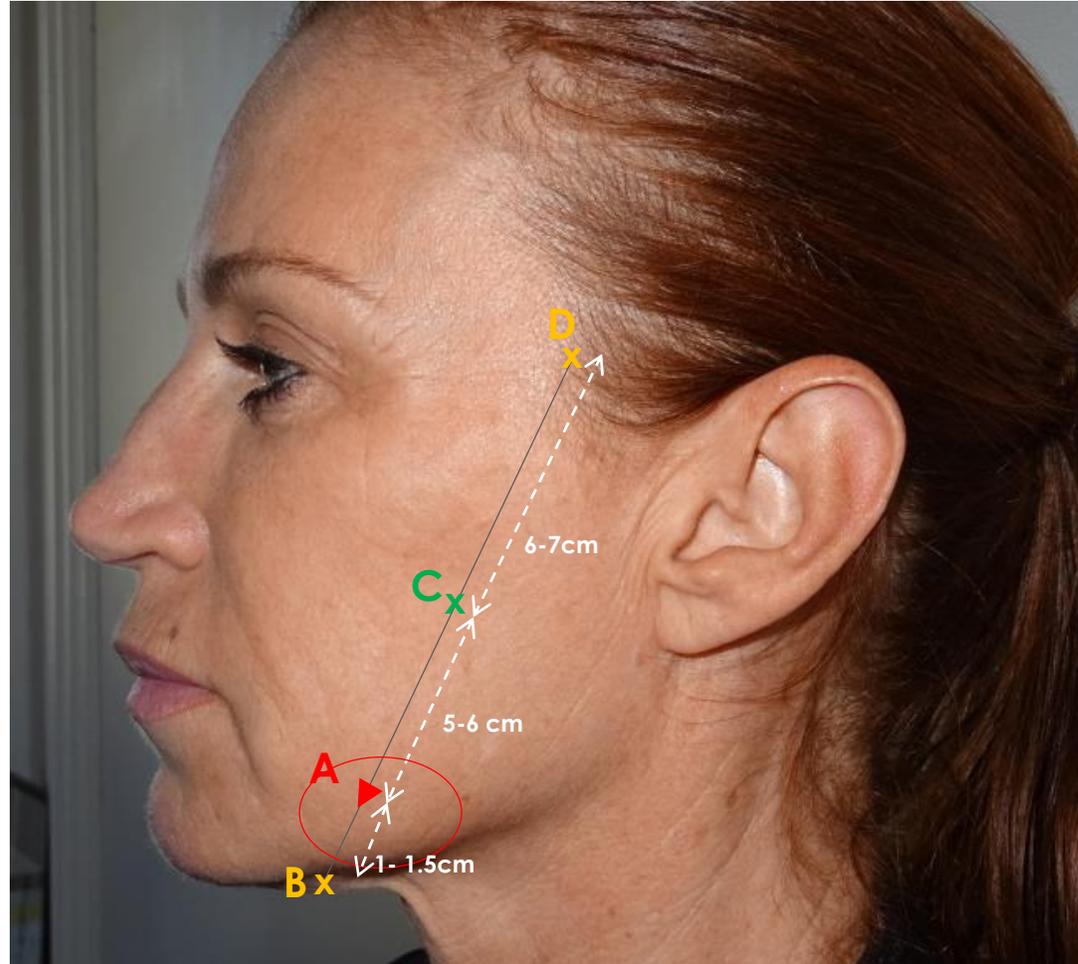


Du point de position du dernier cône (le plus distal) (A)

mesurer le point d'entrée (C) à l'aide de la règle: 5-6cm selon le laxisme de la peau, et

le dernier point de sortie (D): 6-7cm min.

DÉTERMINER LES POINTS D'ENTRÉE/SORTIE DE 12 CÔNES

- A = Dernier placement de cône
- B = Point de sortie (inférieur)
- C = Point d'entrée
- D = Point de sortie (supérieur)

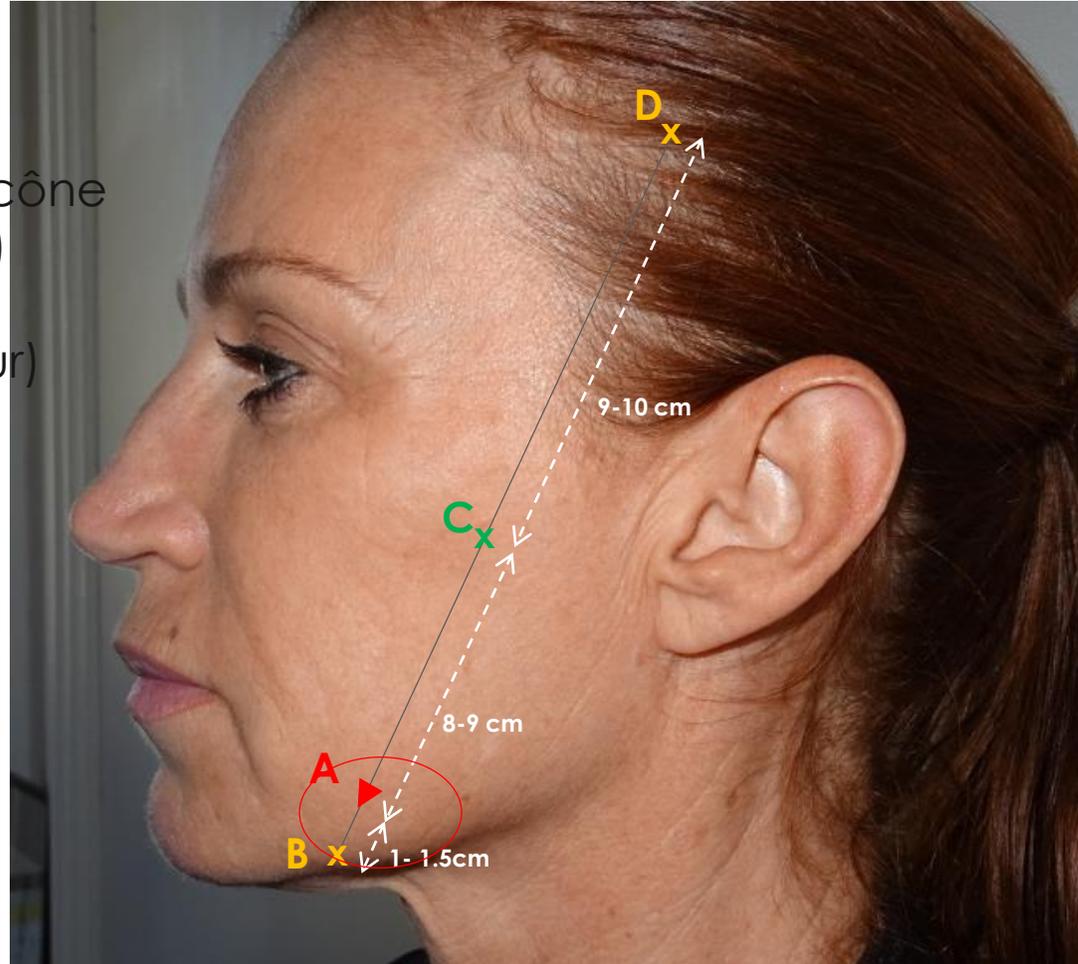

Du point de position du dernier cône (le plus distal) (A)

mesurer le point d'entrée (C), en utilisant à la règle: 8-9cm selon le laxisme de la peau, et le dernier point de sortie (D): 9-10 cm min.

PROCESSUS D'INSERTION

I - Tout d'abord, insérer le côté distal de la suture

> Pour préserver le placement correct du cône distal inférieur


II - Deuxièmement, insérez le côté proximal

III - Insérer toutes les sutures avant de resserrer

IV - Positionner correctement le cône le plus distal du côté distal de chaque suture

> le positionner, tirez l'extrémité de la suture et faites glisser la peau vers le haut tout en appliquant une pression douce avec tous les doigts.

V - Tirez sur l'extrémité proximale de la suture pour maintenir les résultats

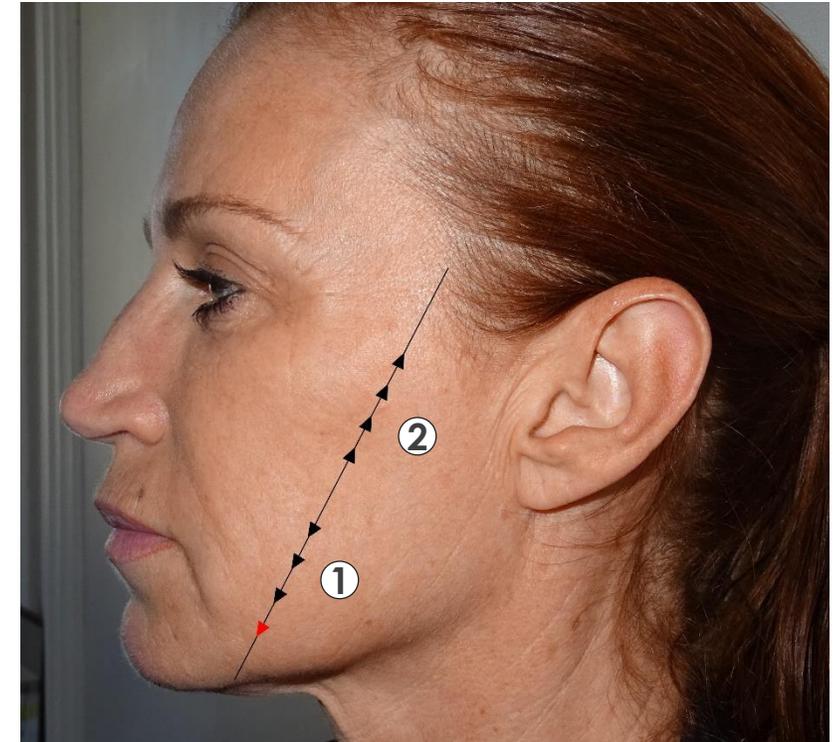

① Côté distal de la suture

② Côté proximal de la suture

UNDERSTANDING THE KEY CONCEPTS

1

CONSIDÉREZ LA ZONE À TRAITER

Silhouette Soft repositionne les compartiments graisseux superficiels affochés responsables du patient le plus commun

2

SÉLECTIONNEZ VOTRE PATIENT AVEC SOIN

- Lors de la sélection du patient, il est important de: - Évaluer la gravité de l'affaissement: les patients appropriés devraient présenter un affaissement modéré et modéré
- Évaluer la qualité de la peau (ni trop fine, ni trop épaisse)
-

3

MARQUAGE ET POINT DE TRACTION LE PLUS EFFICACE

- Déterminez où votre dernier cône doit être placé pour repositionner efficacement les compartiments de tampon de graisse plutôt que de tirer sur la peau
- À partir du point de traction déterminer les points d'entrée et de sortie dans le cas

4

DÉTERMINER LES VECTEURS LES PLUS EFFICACES


- Toujours perpendiculaire à la zone à traiter
- Vec en ligne droite
- Toujours perpendiculaire à la zone à traiter
- Vec en ligne droite

5

DÉTERMINER LE NB APPROPRIÉ DES SUTURES ET DES MOTIFS

- Utilisez le nombre approprié de sutures pour atteindre l'ampleur désirée / zone de repositionnement des tissus en fonction du degré d'affaissement
-

4 - DÉTERMINER LES VECTEURS LES PLUS EFFICACES

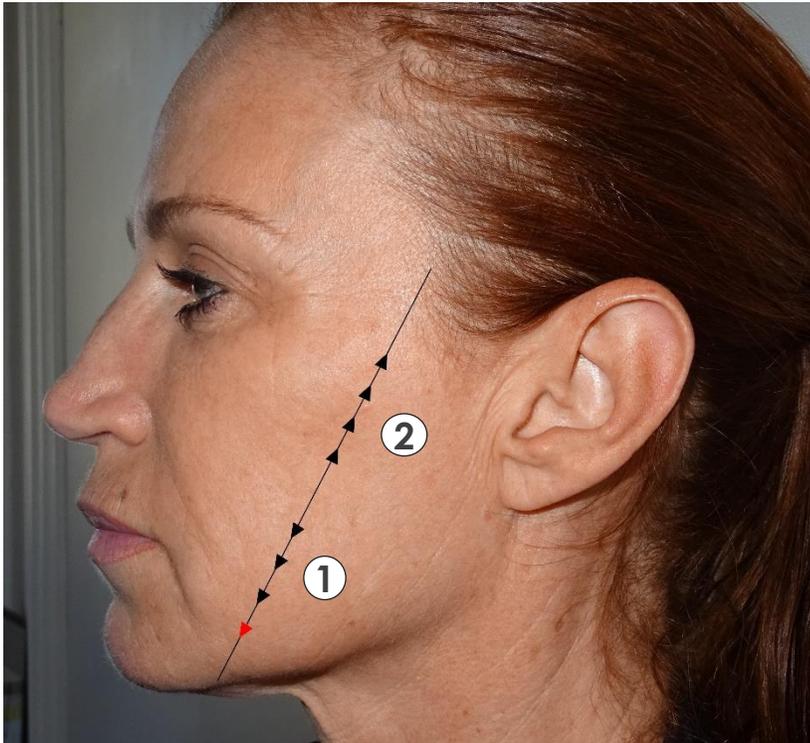

Comportement bidirectionnel de la conception de la suture = une ligne droite

1 et 2 : les deux tissus d'ancrage

1: Suspension tissulaire > Repositionne les tissus mobiles

2: Point de fixation > maintient les résultats



4 - DÉTERMINER L'ANCRE LA PLUS EFFICACE

Ideal suture location

- ▶ Côté latéral : plus dense et moins mobile
- ▶ Côté antérieur : plus mobile et doux

Landmarks:

- ▶ Postérieur au ligament masseteric
- ▶ Au-dessus du ligament zygomatique

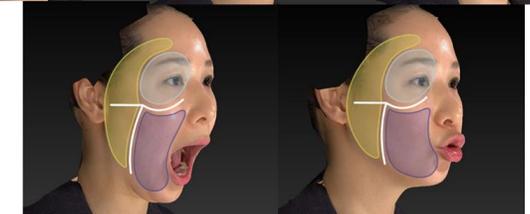
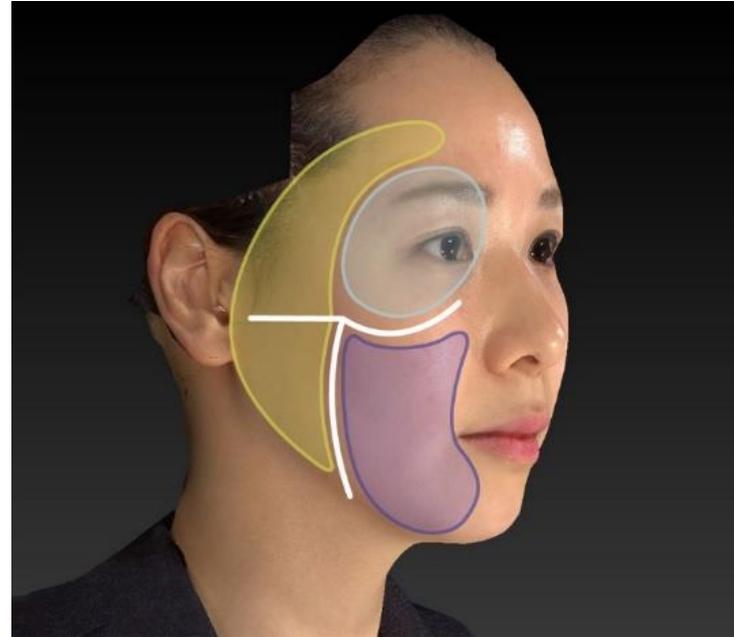


Copyrights : Kyungkook HONG, Dermatologist, Seoul

4 - DÉTERMINER LES VECTEURS LES PLUS EFFICACES



SUSPENSION SUTURES: **INCORRECT APPLICATION**

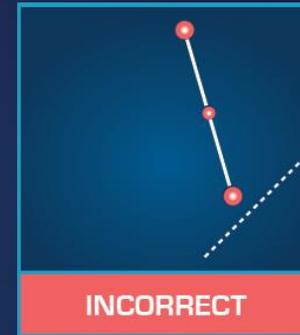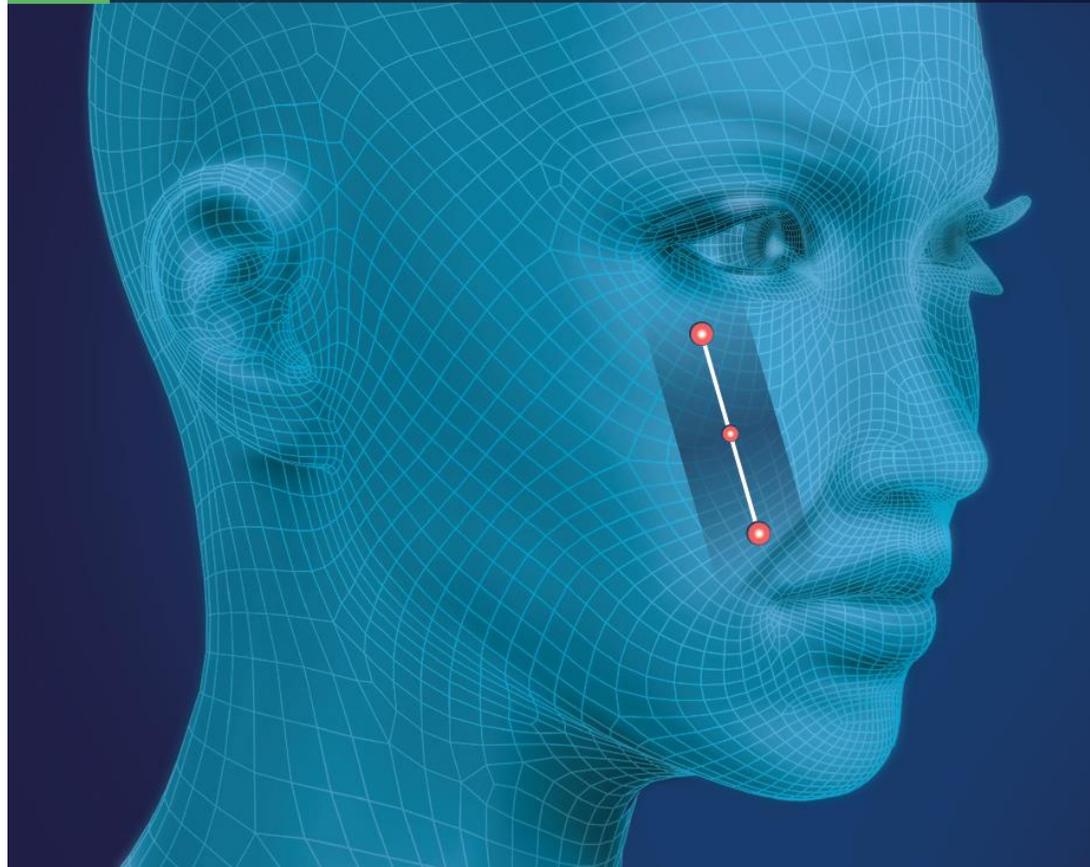



INCORRECT

Sutures positioned off the perpendicular axis cannot provide proper support and offer little correction.

4 - DÉTERMINER LES VECTEURS LES PLUS EFFICACES



SUSPENSION SUTURES: CORRECT APPLICATION

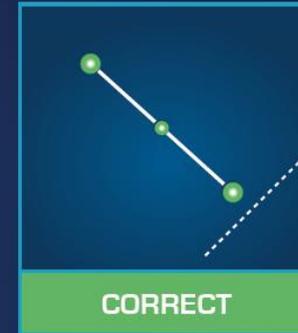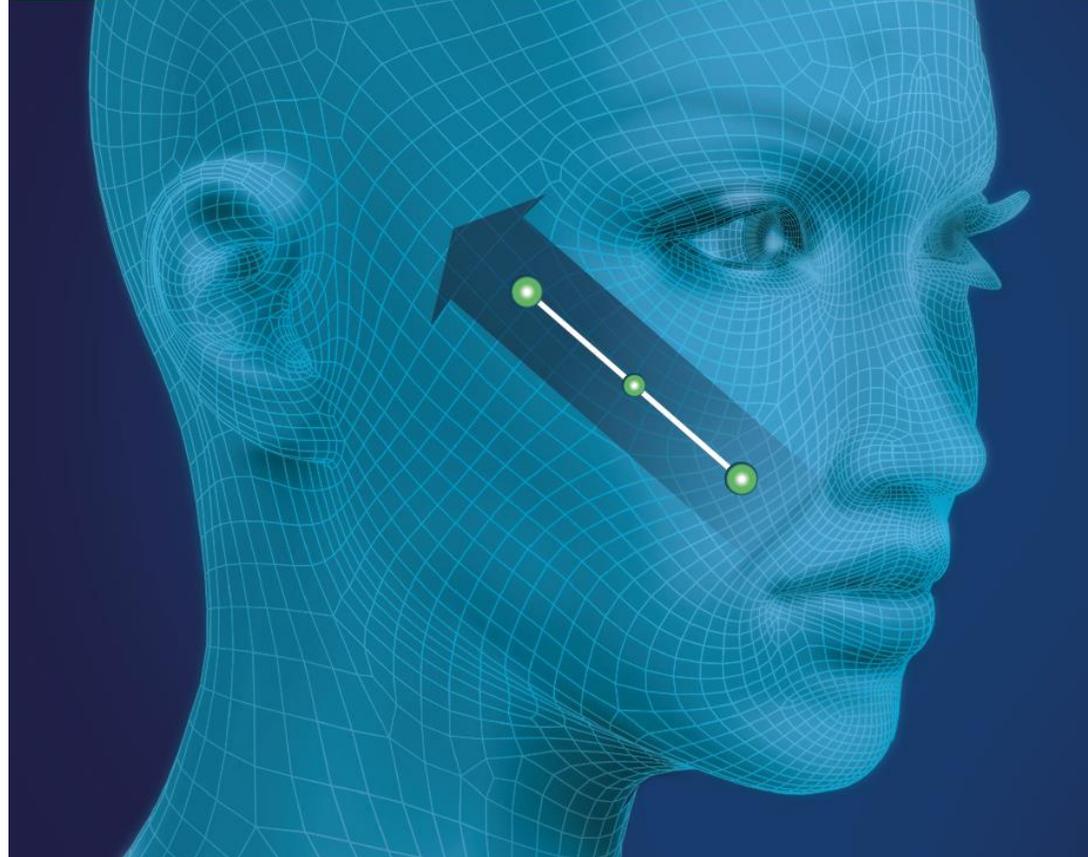

Sutures positioned perpendicularly lift tissue and reduce the nasolabial fold.

UNDERSTANDING THE KEY CONCEPTS

1

CONSIDÉREZ LA ZONE À TRAITER

- Silhouette Soft repositionne les compartiments graisseux superficiels affalés responsables des préoccupations les plus courantes des patients : Plis nasolabial, lignes de marionnettes et bajoues

2

SÉLECTIONNEZ VOTRE PATIENT AVEC SOIN

- Lors de la sélection du patient, il est important de: - Évaluer la gravité de l'affaissement: les patients appropriés devraient présenter un affaissement modéré et modéré
- Évaluer la qualité de la peau (ni trop fine, ni trop épaisse)

3

MARQUAGE ET TRACTION LE PLUS EFFICACE

Déterminez où votre dernier cône doit être placé pour repositionner efficacement les compartiments de tampon de graisse plutôt que de tirer sur la peau

À partir du point de traction déterminer les points d'entrée et de sortie dans le cas de 8 / 12 cônes

Suivez le processus d'insertion : 1 - côté distal de la suture / 2 - côté proximal de la suture

4

DÉTERMINER LES VECTEURS LES PLUS EFFICACES

- Toujours perpendiculaire à la zone à traiter
- Vecteur en ligne droite

5

DÉTERMINER LE NB APPROPRIÉ DES SUTURES ET DES MOTIFS

- Utilisez le nombre approprié de sutures pour atteindre l'ampleur désirée / zone de repositionnement des tissus en fonction du degré d'affaissement

5 - DÉTERMINER LE NB APPROPRIÉ DES SUTURES

- La suspension de la « puissance » des cônes diminue avec la distance latérale du point d'engagement
- Par exemple, irréaliste de s'attendre à ce qu'une seule suture suspende
- L'utilisation du nombre approprié de sutures aidera :
- Atteindre l'ampleur désirée / zone de repositionnement des tissus
- Augmenter la puissance totale de suspension
- Réduire les forces de restauration sur n'importe quel cône individuel – réduction du risque de dérapage
- Fournir un réseau de collagène plus sûr pour soutenir les tissus repositionnés

5 - DÉTERMINER LE MODÈLE APPROPRIÉ

LÉGER AFFAISSEMENT POUR LA PRÉVENTION OU LA CORRECTION PRÉCOCE DE LA PTOSE



Mid-face 8-cone treatment pack

SMS102

6 sutures of 8 cones

Indications:

- Mild tissue sagging of the mid-face
- Volume loss in the cheek area leading to the nasolabial folds and labial commissures appearance.



Lower-face mixed treatment pack

SMS100


2 sutures of 12 cones + 4 sutures of 8 cones

Indications:

- Mild tissue sagging of the lower-face
- Age related changes affecting the definition of the jawline.

5 - DÉTERMINER LE MODÈLE APPROPRIÉ

AFFAISSEMENT MODÉRÉ POUR LA CORRECTION DE PTOSIS MODÉRÉ SANS EXCÈS DE GRAISSE

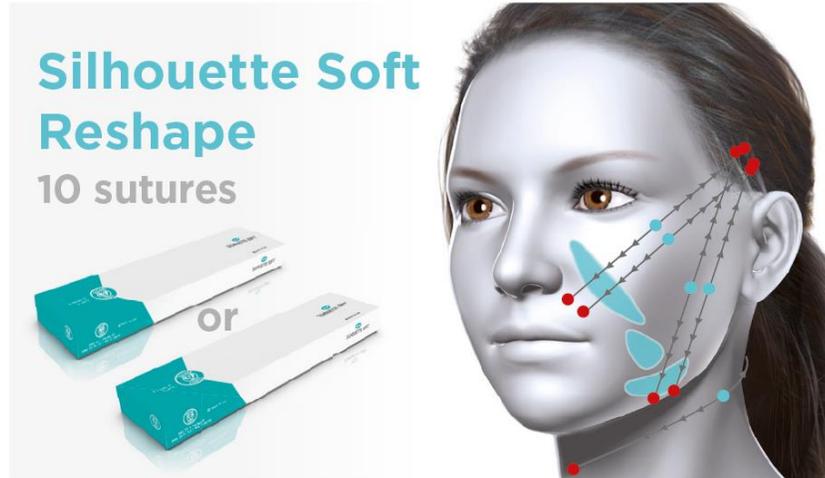

Full-face treatment pack

10 sutures of 8 cones (SMS22) or
10 sutures of 12 cones (SMS23)

Indications:

- Moderate tissue sagging of the face
- Age-related changes affecting the facial shape and contours.

SMS22 or SMS23



Full-face & neck treatment pack

4 sutures of 12 cones + 8 sutures of 8 cones

Indications:

- Moderate tissue sagging of the face and neck
- Age-related changes affecting the facial shape and contours, as well as neck contours.

SMS100 x2boxes



SILHOUETTE SOFT®

